

# Faculdade de Ciências Departamento de Física

#### LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA

### Aula Laboratorial 01: Avaliação da absorção da Radição ionizante por materiais

### 1 Introdução

A radioactividade pode ser definida como sendo o fenómeno desintegração espontânea ou induzida dos núcleos de um ou mais átomos.

O fenómeno foi descoberto por Henri Becquerel, um físico francês, cujas observações, conduziram à descoberta, mais tarde, da existência de 3 diferentes tipos de radiação: a radiação alfa – um átomo de Hélio duplamente ionizado, a radiação beta.

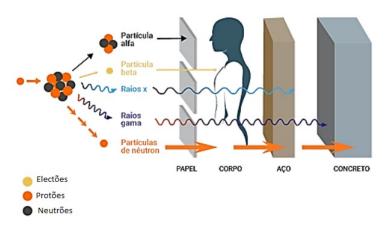


Figura 1: Poder de penetração da radiação ionizante

A energia de cada radiação emitida pelo núcleo depende do comprimento de onda dessa mesma radição. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia de penetração do feixe de radiação emitido (veja Fig.1).

A blindagem é o mais importante método de proteção radialógica. Tanto que, a atenuação do poder de penetração da radiação pelo material da blindagem é determinada pela energia, pela natureza do material absorvedor e a sua espessura.

### 2 Objectivos

- Determinar o coeficiente de atenuação do Chumbo e ferro à radiação gama;
- Avaliar a atenuação e o poder de penetração das radiações ionizantes.

### 3 Metodologia

A radiação ionizante emitida por qualquer fonte radioactiva pode alcançar até centímetros, dependendo da sua energia sob condições normais de pressão e temperatura.

Analiticamente a enegia da radiação emitida pela fonte radioactiva é dada camo:

$$E_x = \sqrt[3]{\frac{N}{0.476}} \tag{1}$$

Onde: N é o número de partículas transmitidas na presença do material de blindagem.

N é determinado pode ser analiticamnte determinado de acordo com aquação;

$$N = N_0 \exp[-(\eta)d] \tag{2}$$

Onde:  $N_0$  é determinado experimentalmente e representa o número de partículas transmitidas na ausência do material de blindagem, "d" a espessura do material e  $\eta$  é o coeficiente de atenuação da radiação.

A probabilidade de a radiação ionizante ser detectada depende não só da distância que esta percorre, mas também das características intrínsecas do instrumento detector como o tempo morto. Portanto, todas as medições realizadas devem ser calibradas não só em relação à contribuição do fundo, mas também em relação ao tempo morto. Assim cada valor médio determinado do número de contagens deverá ser expresso como,

$$N_C = \frac{N}{1 - N\tau} \tag{3}$$

Onde:  $N_C$  representa o número de partículas transmitidas na presença do material de blindagem corigido em relação ao tempo morto.

au é determinado pelo método de duas fontes e representa o tempo morto do detector e dado como;

$$\tau = \frac{N_1 + N_2 - N_{12}}{2N_1 N_2} \tag{4}$$

Os valores de  $N_1$  e  $N_2$  representam as taxas de contagens directamente medidas com coreção do fundo para cada fonte emissora, e  $N_{12}$  as taxas devido a contribuição de radiação conjunta das duas fontes com coreção do fundo.

# 3.1 Modo de Execução Experimental

# 3.1.1 Calibração da experiência: Determinação do tempo morto

- Com o sistema sem fonte de radiação ionizante, meça as contribuições do fundo durante 60 segundos e registe na tabela;
- Repita o procedimento anterior para mais 5 medições diferentes;
- Meça as contribuições individuais e depois conjuntas das fontes desconhecidas A e B e registe na tabela.

### 3.1.2 Determinação do coeficiente de atenuação no chumbo e ferro

- Posicione fonte radioactiva A na base do suporte das placas;
- Estime a distância entre a fonte radioactiva e a janela do detector;
- Meça e registe as contribuições da fonte A para 5 posições diferentes;
- Repita o procedimento anterior para uma posição fixa, meça as contribuições da fonte adicionando as placas para obter medidas de contagens em 3 espessuras diferentes e registe na tabela.

### 4. Tarefas:

- 1. Determine os valores médios e respectivos erros absoluto das contagens;
- 2. Determine o tempo de morto do detector;
- 3. Determine a energia emitida pela fonte de radiação
- 4. Construa uma relação da taxa de contagens e a espessura das placas para cada material,
- 5. Determine o coeficiente de atenuação da radiação ionizante.
- 6. Elabore um relatório (no máximo 5 páginas, com introdução, metodologia, resultados e sua discussão e conlusão) desta actividade e submeter dentro de 7 dias no: https://github.com/Macmatsinhe/ESPECTROSCOPIA/issues/1

# 5. Bibliografia recomendada

- Phywe Series of Publications Laboratory Experiments Physics, PHYWE SISTEM GMBH, 37070 Gottingen, Germany;
- 2. Martin, Harbison, Beach, Cole "An Introduction to Radiation Protection" Hodder Education Uk 2006;
- 3. Daniel Marcos Bonnoto, "Radiactividade", editora UNESP, Brasil 2003
- 4. Knoll, G. E. (2000). Radiation Detection and Measurement..Third Edition. J. W. Sons. New York